



AirMini přístroj

nosní sada

AirMini sada N20



- 1x N20 kolínko k AirMini
- 1x AirMini hadice
- 1x zvlhčovací tableta HumidX
- 1x zvlhčovací tableta HumidXPlus



AirFit™ N20

nízkokontaktní sada

AirMini sada P10

nebo  
AirMini sada N30



- 1x maska AirFit P10 nebo AirFit N30 pro AirMini
- 1x AirMini hadice
- 1x zvlhčovací tableta HumidX
- 1x zvlhčovací tableta HumidXPlus

celoobličejová sada

AirMini sada F20/F30



- 1x F20/F30 kolínko k AirMini
- 1x AirMini hadice
- 1x zvlhčovací tableta HumidX F20 (jen pro masku AirFit F20)



AirFit™ F20



AirFit™ F30

## Příslušenství



HumidX F20  
zvlhčovací tablety (6 ks)




HumidX Plus  
zvlhčovací tablety (6 ks)




AirMini cestovní taška




AirMini cestovní pouzdro

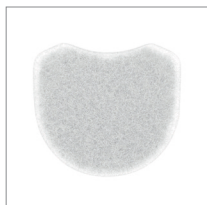


AirMini náhradní filtry (2 ks)  
standardní či hypoalergenní

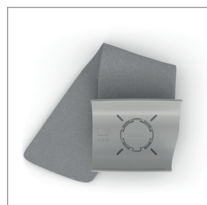

AirMini držák k lůžku

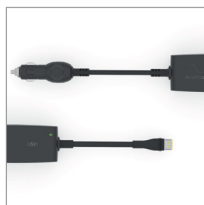

AirMini DC měnič do auta

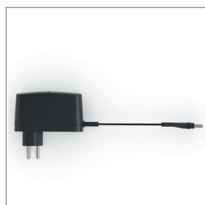

AirMini adaptér



# ResMed

## AirMini

AirMini™ je malý rozměry, velký výkonem a nabízí kvalitní léčbu poruch dýchání ve spánku, na kterou jste zvyklí u přístrojů ResMed. Díky uživatelsky přívětivému a přenosnému řešení již nemusíte omezovat svou léčbu ani na cestách.

### Malý

AirMini je nejmenší cestovní přístroj na světě pro vytváření automatického přetlaku v dýchacích cestách.

### Chytrý

Díky aplikaci AirMini budete mít přehled o své léčbě vždy na dosah. V aplikaci AirMini si můžete jednoduše nastavit funkce pohodlí dle Vašich osobních potřeb a sledovat vývoj své léčby.

Aplikace AirMini je kompatibilní s mobilními operačními systémy iOS i Android a můžete si ji volně stáhnout z AppStore či Google Play.

Aplikace AirMini Vám nabízí přístup k souboru krátkých filmů ohledně správného používání přístroje a odpovídajícího příslušenství.

### Prověřený

AirMini využívá osvědčené algoritmy ResMed v kombinaci s maskami generace AirFit. Jako jediný cestovní přístroj na trhu udržuje optimální zvlhčení vzduchu v masce.

Za účelem nejúčinnějšího fungování je přístroj kompatibilní pouze s nejnovějšími maskami ResMed generace AirFit – celoobličejová maska AirFit F20, nosní maska AirFit N20 a nosní polštářky AirFit P10 pro AirMini.

AirMini nabízí nejnovější zvlhčovací systém HumidX, který poskytuje podobnou hladinu zvlhčení jako klasický ResMed přístroj, ale bez vody. HumidX a HumidX Plus zvlhčovače jsou kompatibilní pouze s maskami AirFit N20 a AirFit P10 pro AirMini.

## Technické parametry

### AirMini přístroj

Rozměry:	136 mm (Š) x 84 mm (V) x 52 mm (H)
Hmotnost:	300g
Kryt:	konstrukční termoplast se samozhášecí přísadou

### Režim

Provozní rozpětí tlaku:	AutoSet, AutoSet For Her, CPAP 4-20 cm H <sub>2</sub> O (4-20 hPa)
-------------------------	---

### AirMini napájení

Spotřeba energie v pohotovostním režimu:	1W
--	----

### Hlučnost

(režim CPAP) 29dBA s odchylkou 2 dBA naměřenou podle ISO 80601-2-70:2015

### Napájecí jednotka

AC vstupní rozsah:	100–240V, 50–60Hz 115V, 400Hz (nominální pro použití v letadle)
Výstup DC:	24V, 0.83A
Typická spotřeba energie:	6.3W
Maximální spotřeba energie:	27W

### Provoz:

Teplota:	+5C až +35C
Vlhkost:	10-95% relativní vlhkosti, nekondenzující
Nadmořská výška:	mořská hladina až 2 591m; rozsah tlaku vzduchu 1013 – 738 hPa

### Skladování a přeprava

Teplota:	-25C až +70C
Vlhkost:	10-95% relativní vlhkosti, nekondenzující

### Použití v letadle

společnost ResMed potvrzuje, že zařízení splňuje požadavky Federal Aviation Administration (FAA) (RTCA/DO-160, odstavec 21, kategorie M) pro všechny fáze letecké přepravy

### Elektromagnetická kompatibilita

AirMini dodržuje všechny příslušné požadavky (EMC) podle IEC60601-1-2:2014 pro obytné, komerční a lehké průmyslové prostředí

### IEC 60601-1:2014 (Edice 3.1) klasifikace

Třída II (dvojí izolace), typ BF, ochrana proti vniknutí IP22

