

Série SE-601

Elektrokardiograf



Série SE-601

Elektrokardiograf



Společnost Edan

Edan je zdravotnická společnost, která se věnuje zlepšení životních podmínek lidí po celém světě dodáváním hodnotných, inovativních a vysoce kvalitních zdravotnických produktů a služeb. Již více než 20 let je společnost Edan průkopníkem obsáhlé řady zdravotnických řešení, která zahrnují široký rozsah lékařských metod včetně:

- | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| • Diagnostické EKG | • Ultrazvukové zobrazování | • Diagnostika <i>In-Vitro</i> |
| • Monitorování pacienta | • Zobrazování diagnostiky v místě pacienta | • Veterinární diagnostika |
| • Monitorování OB/GYN | | |

Odborní pracovníci pracující ve zdravotnictví po celém světě spoléhají na průlomové zdravotnické technologie a vynikající zákaznickou podporu.



Global Headquarters:
Edan Instruments, Inc. | 15 Jinhui Road, Pingshan District, Shenzhen
518122 P.R. China | +86.755.26898326 | www.edan.com | info@edan.com
U.S. and Canada inquiries:
EDAN Diagnostics, Inc. | 9918 Via Pasar, San Diego, CA 92126
+1.858.750.3066 | www.edandiagnostics.com | edan-info@edandiagnostics.com

© Edan Instruments, Inc. Všechna práva vyhrazena. Funkce a specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení.
Reprodukce, kopírování nebo přenos bez předchozího písemného povolení nejsou možné. Všechny produkty nebo funkce nemusí být dostupné ve všech zemích. Kontaktujte Edan ohledně lokální dostupnosti.



Série SE-601

Vícekanálový elektrokardiograf



Design přátelský pro uživatele

- Kompaktní a přenosný design
- 5.6 palců velký dotykový displej s vysokým rozlišením (volitelný)
- Alfanumerická klávesnice

Zjednodušený pracovní postup

- jednodotkové ovládání
- Pomocný skener čárových kódů ke zjednodušení pracovního postupu (pro SE-601B/C)

Přesný klinický výkon


- 12 simultánních svodů
- Vzorkovací frekvence 16,000 Hz umožňuje záznam všech dat za účelem získání přesného výsledku
- Detekce slabého signálu s vyspělým 24bitovým převodníkem
- Protihluková technologie s komplexními filtry a vysokým CMRR přes 140 dB
- Frekvenční pásmo od 0.01 do 300 Hz zaručuje interpretaci zejména pro pediatrické pacienty.
- Rozšířený tisk, jakmile je detekována arytmie pro další analýzu srdečního rytmu
- Automatická měření a interpretace testovány s CSE/AHA/MIT databází
- Volitelný algoritmus Glasgow se specializovanou interpretací dětského EKG

Management dat

- Interní uložení až 800 záznamů EKG, může být rozšířeno USB flash diskem
- Software SE-1515 pro management dat na PC (volitelné)
- Formát zpráv: PDF (pro SE-601B/C) a volitelný
- Export dat SCP/FDA-XML/DICOM



SE-601C s pojízdňm stojanem (5.6" barevný dotykový displej)

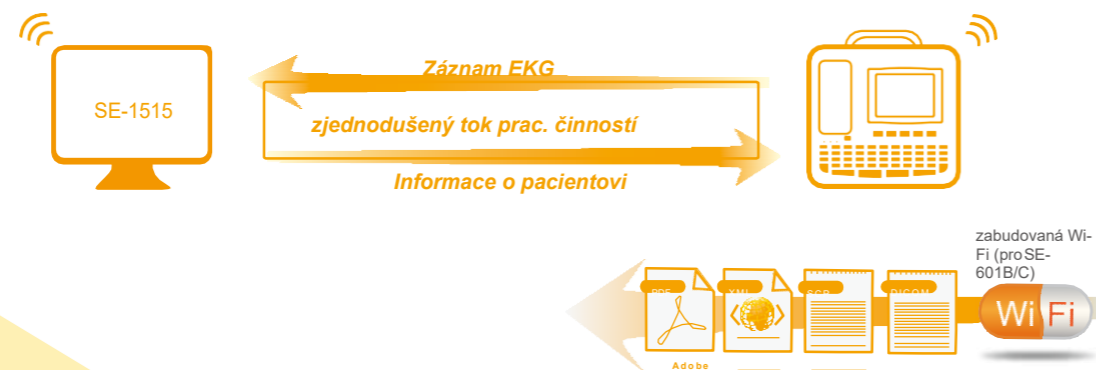

SE-601A
(3.5" monochromatický LCD displej)



SE-601B
(5.6" barevný LCD displej)

Bezproblémová propojitelnost



Propojte Vaše data z EKG pomocí systému managementu dat EDAN SE-1515

- Obousměrná komunikace s přístroji EKG pro editaci pracovních seznamů a zpráv
- Kardiologické konzultace EKG prostřednictvím sdílení databáze
- Různé formáty zpráv včetně PDF, XML, SCP, DICOM, JPG, BMP a DOC
- Přístup k datům pomocí HIS/EMR/PAC/CIS na základě protokolu HL7/DICOM/GDT