

Cryospray SMT CS 1, CS 1/3, CS 1-SM



Typ CS 1 SM

Typ CS 1/3

Typ CS 1




Cryospray CS 1 obsahuje již v základní sestavě 4 sprayovými koncovkami SJ4, SJ6, SJ8, SJ10 a kontaktní koncovkou ST6 v stojánku na 5 koncovek. **Cryospray CS1/3** je vybaven 3 sprayovými koncovkami SJ4, SJ6 a SJ8 v stojánku. **Cryospray CS 1-SM** je dodáván s koncovkou SJ6. Dále lze objednat celou řadu dalších trysek a kontaktních koncovek dle prospektu a odkládací stojan na přístroj. K dispozici jsou i Dewarovy nádoby a přečerpávací zařízení na dusík PIPE 1.

Cryospraye CS 1 jsou určeny na efektivní léčení široké škály kožních lézí: Běžné veruky, seborhoické keratomy, aktinické keratomy, papilomy, lentiga, basaliomy a další běžné kožní léze. Kromě toho lze s výhodou použít i na chirurgické zákroky, například na hemeroidy. Jedná se o nejméně chladnější -196°C, a tedy o neúčinnější dostupnou kryochirurgickou metodu. Aplikace je jednoduchá a rychlá - pro většinu zákroků postačí 3 - 30 sekund. Výrazně vyšší účinnost než při aplikaci dusíku tzv. štětičkami. V porovnání s chirurgickými zákroky skalpelem či elektrochirurgicky žádná nebo minimální bolest, bez zápachu, nekrvavý zákrok, není třeba obvaz nebo bandáž, většinou není třeba anestezie, není třeba sestry pro asistenci, žádný medicínský odpad, výborný kosmetický efekt, minimální nebo žádná jizva.

| Technické parametry | CS 1 | CS 1/3 | CS 1-SM |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Chladicí médium | kapalný dusík | kapalný dusík | kapalný dusík |
| Objem | 0,5 l | 0,3 l | 0,2 l |
| Pracovní tlak | 90 kPa | 90 kPa | 90 kPa |
| Izolace | vakuová | vakuová | vakuová |
| Hmotnost bez dusíku | 470 g | 420 g | 350 g |
| Hmotnost s dusíkem | 800 g | 660 g | 500 g |
| Rozměry | Ø 70 mm, v 300 mm | Ø 70 mm, v 250 mm | Ø 60 mm, v 200 mm |
| Základní vybavení | přístroj, stojan, 5 koncovek | přístroj, 3 koncovky | přístroj, 1 koncovka |
| Základní koncovky | SJ4, SJ6, SJ8, SJ10, ST6 | SJ4, SJ6, SJ8 | SJ6 |
| Použití kontaktních koncovek | ano (s montážním klíčem) | ano (s montážním klíčem) | ano (s montážním klíčem) |

SJ 4, 6, 8, 10

D = 0,4 mm
D = 0,6 mm
D = 0,8 mm
D = 1,0 mm

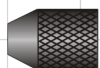

ST 6


D = 6 mm



Trysky pro Dermatologii

J 4

D = 0,4 mm

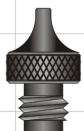

J 6

D = 0,6 mm



J 8

D = 0,8 mm (Ø otvoru)



Prodloužené trysky pro Dermatologii a ORL

J 100 D = 0,9 mm (Ø otvoru)
L = 100 mm



J 70 D = 0,9 mm
L = 70 mm



J 40 D = 0,9 mm
L = 40 mm



Kontaktní koncovky pro Oftalmologii


O 2

D = 2 mm
L = 35 mm



OC 2

D = 2 mm (Ø koncovky)
L = 35 mm

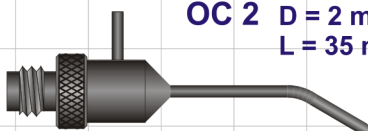

montážní klíč


P 5/100

D = 5 mm
L = 100 mm




P 5/80

D = 5 mm
L = 80 mm

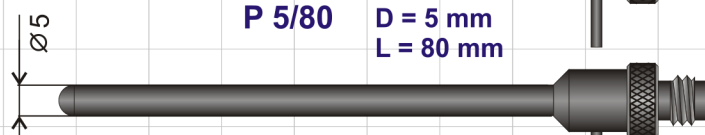

P 5/40


D = 5 mm
L = 40 mm

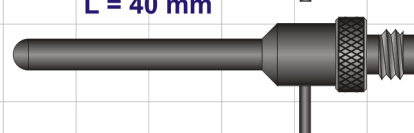

základní sada koncovek CS 1


DT 20

D = 20 mm

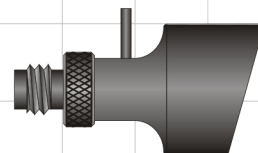


D 10

D = 10 mm

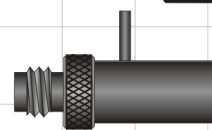


DT 5

D = 5 mm

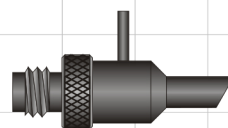


D 5

D = 5 mm

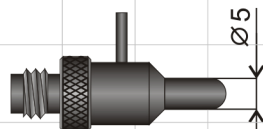


DT 3

D = 3 mm

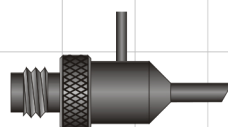

DT 2

D = 2 mm

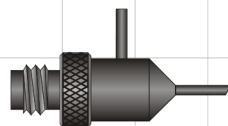

Kontaktní koncovky pro Proktologii